

Ayudas técnicas. AYUDAS TÉCNICAS A LA MOVILIDAD. Ref. 02228



Descripción del producto


Asiento de ducha de dos patas a suelo.

Estructura realizada en aluminio.

Asiento y accesorios realizados en ABS blanco.

Estructura acabado anodizado.

Peso máximo estático y dinámico que soporta: 120 Kg.

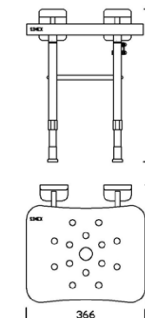

Especificaciones técnicas:

Asiento de ducha abatible con dos patas a suelo. El producto se compone de una estructura realizada en aluminio y una superficie de sentado. La estructura, realizada íntegramente en aluminio anodizado, se trasdosa a pared mediante dos soportes con bisagra de giro. Las dos patas regulables a suelo, unidas a la estructura del asiento mediante dos bisagras, están realizadas en tubo cuadrado de aluminio anodizado e incorpora una contera de material plástico en la zona inferior siendo su abatimiento automático. La superficie de sentado, realizada en material termoplástico ABS, se fija a la estructura abatible de aluminio. El conjunto metálico tiene un acabado anodizado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. Sus materiales aseguran su buen mantenimiento y limpieza. El asiento va fijado mediante 8 tornillos y 8 tacos de nylon a pared soportando estas condiciones una fuerza estática y dinámica de 120Kg. Las dimensiones del producto son 547x366x364mm. El modelo de ayuda técnica es 02228.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Estructura tubular realizada en aluminio anodizado color plata.

Asiento y accesorios realizados en ABS color blanco.

Abatimiento automático de la pata.

Dos patas de apoyo con regulación.

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120Kg.

Especificaciones del embalaje

Dimensiones el embalaje individual:

Peso del embalaje individual:


Dimensiones del producto: 547x366x364mm

Peso del producto:

(1) El peso soportado depende del tipo de pared. en este caso el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados montados de forma correcta. Para otros tipos de pared consultar con el fabricante.

Certificados:

Plantilla de montaje.

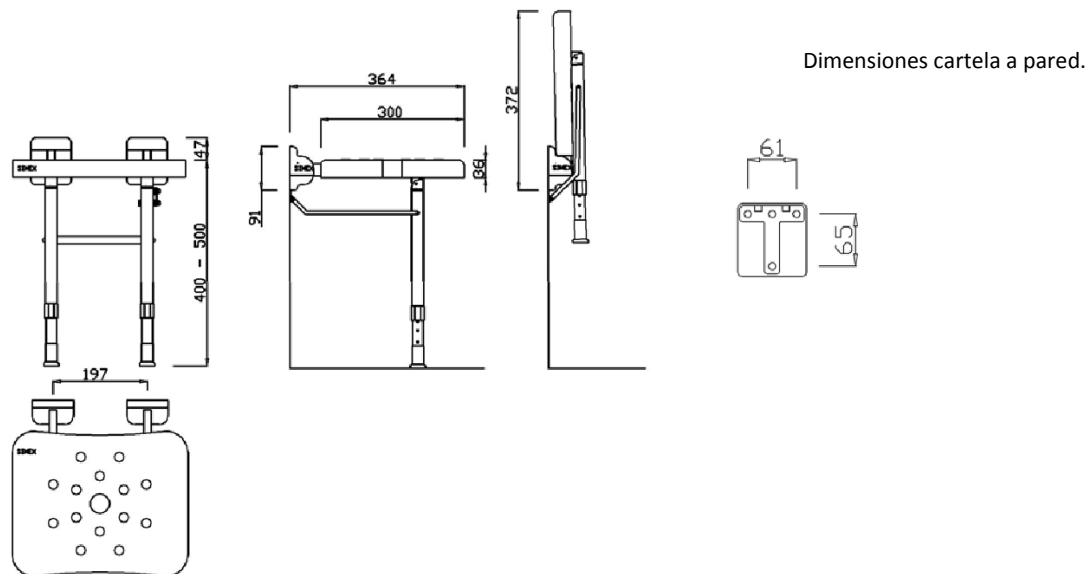

Funcionamiento: La posición de uso del asiento es en posición horizontal, siendo la posición abatida sólo recomendada para permitir la accesibilidad.

Limpieza: Pasar paño húmedo con agua y detergente neutro, nunca abrasivo. Secar con paño limpio y seco, que no desprenda pelusa.